



Bitte unbedingt vor Gebrauch lesen!

Die Zeckenmaus oder auch Ticks mouse genannt, ist ein auf dem Markt neues Produkt zur sicheren, berührungslosen und schnellen Entfernung (mit Aufbewahrungsmöglichkeit) von Zecken. Sie ist der Wegweiser für ein innovatives und multifunktionales System zur Entfernung von Zecken. Keines der bisher auf dem Markt verfügbaren Produkte hat die Möglichkeit Zecken gleich nach der Entfernung in einer extra dafür integrierten Kammer zu sammeln. Ist der Vorgang abgeschlossen, können alle Parasiten gleichzeitig entsorgt werden. Dadurch vermeiden Sie die Verbreitung der Parasiten in Ihrem Wohnzimmer, Stall und haben gleichzeitig einen Transportbehälter, falls die Zecke zu weiteren Untersuchungen (Zeckenschnelltest etc.) zum Arzt gebracht werden sollte.

Die Zeckenmaus entfernt die Parasiten einfach und ohne Druck auf den Darm. Ein Rückfluss von Speichel, welcher mehrere Reizstoffe und manchmal Mikroorganismen enthält, zu Allergien und Infektionen führt findet nicht statt. Pinzetten und andere Instrumente dieser Art üben Druck auf die Zecke aus. Die Zeckenmaus entfernt die Parasiten berührungslos, sie kommen mit ihr nicht in Kontakt, lässt keine Mundteile in der Haut zurück und ist auch für Tiere mit langem Fell geeignet. Hunde-, Katzen- und Pferdebesitzer aber auch Menschen (Jäger, Forstarbeiter etc.), welche der Zeckenbiss- Gefahr ausgesetzt sind, sprechen wir eine klare Empfehlung zur Nutzung der Zeckenmaus aus.

FÜR MENSCH UND TIER GEEIGNET: Die Zeckenmaus entfernt mühelos Zecken, sowohl bei Tieren (Hund, Katze, Pferd etc.) als auch bei Menschen (Kinder, Erwachsene). Damit gehört die Zeckenmaus in jeden Haushalt.

SAUBER: Die Parasiten werden – einer nach dem anderen – in einer extra dafür angelegten Kammer gesammelt und dann entsorgt bzw. zur Kontrolle zum Arzt mitgenommen.

BERÜHRUNGSLOS: Zu keiner Zeit kommen Sie mit dem Parasiten in Berührung, weder beim Entfernen noch beim Entsorgen.

SICHER: Mit der einzigartigen Zeckenmaus ist es nahezu unmöglich, die Zecke falsch zu entfernen.

HYGIENISCH: Die Zeckenmaus wird durch einfaches Auskochen im Wasserbad bequem und steril gereinigt.

DEUTSCHE ENTWICKLUNG: Die in Deutschland entwickelte Zeckenmaus ist patentiert.

Zecken haben die Neigung bei der kleinsten Berührung, ihr Sekret welches mit Erregern unterschiedlichster Art infiziert sein kann, dem Wirt zu injizieren. Deshalb ist es sehr wichtig, die Zecke schnell und schmerzlos mit samt Kopf aus dem Wirt zu entfernen. Somit sollte die Entfernung der Zecke immer beim ersten Versuch mit Erfolg abgeschlossen werden. Hat sich der Parasit gerade erst festgebissen, ist er in der Regel noch sehr klein. Einen sehr kleinen Parasit aus dem Wirt zu entfernen birgt immer die Gefahr mit sich, diesen nicht gleich auf Anhieb zu erwischen und somit entfernen zu können. Die meisten Unfälle (Kopfabriss oder Entzündungen etc.) mit Zecken ereignen sich größtenteils, beim Versuch sehr kleine Zecken zu entfernen. Deshalb sollte die Sicherheit immer vor einer zu schnellen Entfernung stehen. Trauen Sie sich die schnelle Entfernung der Zecke aufgrund ihrer geringen Größe nicht zu, dann überlassen Sie diese dem geschulten Fachpersonal (Arzt oder Tierarzt). Sie können den Parasit im Körper des Wirtes verweilen lassen bis dieser eine entsprechende Größe zur sicheren Entfernung erreicht hat. Damit gehen Sie jedoch immer ein Risiko ein, dass sich der Wirt mit dem Secret des Parasit während dieser Verweilzeit infiziert.

Die Zeckenmaus ist sehr einfach zu bedienen muss jedoch wie jedes andere Werkzeug auch, richtig angewendet werden. Durch eine unsachgemäße Anwendung können sich Unfälle (Kopfabriss oder Entzündungen etc.) ereignen. Sollte dieser Fall eintreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Tierarzt. Wurde eine Zecke entfernt raten wir in jedem Fall den Parasit durch Ihren Arzt auf Erreger untersuchen zu lassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Parasit bei einem Menschen entfernt wurde.



Please read these instructions carefully before use!

Ticks mouse is a new product on the market for the fast, safe and contact-free removal of ticks (with storage possibility). This product leads the way as an innovative and multifunctional system for the removal of ticks. No other product currently on the market offers the possibility of collecting ticks in an integrated compartment specially designed for this purpose. Once the collection process is completed, all the parasites can be disposed of at once. This enables you to avoid the spread of the parasites in your living room or barn. At the same time, you also have a transport container in case you intend to take the ticks to a doctor for further examination (e.g. rapid screening for tick-borne diseases).

Ticks mouse effortlessly removes the parasites without applying pressure to the tick's gut. This prevents the reflux of tick saliva, which contains several irritants and sometimes microorganisms that may cause allergies or infections. Tweezers and similar instruments apply pressure to the tick. Ticks mouse removes the parasites without any contact with the skin, and leaves no mouth parts behind in the skin. It is also suitable for animals with long fur. We highly recommend that you use Ticks mouse if you own dogs, cats or horses, and if you are at risk of tick bites due to your profession (hunter, forestry worker, etc.).

SUITABLE FOR BOTH HUMANS AND ANIMALS: Ticks mouse effectively removes ticks from humans (children, adults) and animals (dogs, cats, horses, etc.). This makes it a must-have product for every household.

CLEAN: Parasites are collected in the integrated compartment – one by one – and removed or taken to a doctor for further examination.

CONTACT-FREE: At no point does your skin come into contact with the parasites, neither during their collection nor during their removal.

SAFE: It is virtually impossible to remove a tick incorrectly with the unique system of Ticks mouse.

HYGENIC: By boiling Ticks mouse in a water bath, cleaning is simple and sterile.



GERMAN DEVELOPMENT: Developed in Germany, Ticks mouse is patented.

Even at the slightest touch, ticks have the tendency to inject their secretion, which can be infected with various viruses, into their host. This makes it important to remove the tick and its head quickly and painlessly. The process of removing the tick should be successful at the first attempt. Once the parasite has locked itself into the skin, it is still generally very small. Removing a very small parasite from the host entails the risk of not catching it straightaway and thus not being able to remove it at all. Most accidents (head detachment, infections, etc.) occur while trying to remove the tick. That is why safety should always take priority over quick removal. If you are unsure about removing the tick quickly because of its small size, consult a qualified specialist (doctor or vet). You can leave the parasite in the body of the host until it has reached a size at which it is safe to remove. However, this also increases the risk of the host being infected with the secretion of the parasite.



Ticks mouse is very easy to handle but, just like any other instrument, must be used correctly. When used improperly, accidents (head detachment, infections, etc.) may occur. Should this be the case, consult a doctor or a vet. Once a tick has been removed, we highly recommend that you have it examined by your doctor for any viruses. This particularly applies if the parasite has been removed from a human.




- Pic. 1 Mondschieber schließen (mit Daumen in Pfeilrichtung drehen)
- Pic. 2 Maus aufsetzen, V-Ausschnitt mittig in Richtung Zecke schieben
- Pic. 3 Jetzt befindet sich die Maus unter dem Kopf der Zecke
- Pic. 4 Zecke einfach aushebeln (Maus in Pfeilrichtung bewegen)
- Pic. 5 Maus aufstellen, Zecke fällt auf Unterseite Mondschieber
- Pic. 6 Mondschieber öffnen, Zecke fällt in untere Kammer
- Pic. 7 Mondschieber schließen, Zecke ist nun in der Kammer gesichert
- Pic. 8 Am Ende alle Zecken durch öffnen des Kappenverschlusses (zum Öffnen nach links drehen) entsorgen

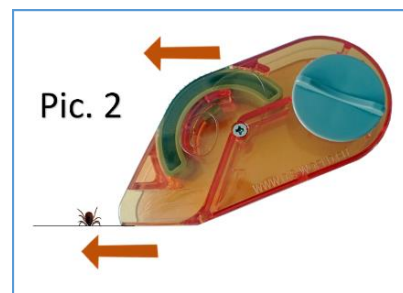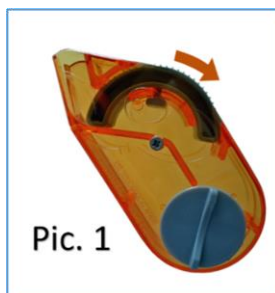



- Pic. 1 Close the crescent slider (use your thumb to turn slider in the direction of the arrow)
- Pic. 2 Place the mouse on the skin, push the V-section centrally in the direction of the tick
- Pic. 3 Now the mouse is under the head of the tick
- Pic. 4 Simply lever out the tick (move the mouse in the direction of the arrow)
- Pic. 5 Position the mouse vertically, the tick falls into the bottom of the crescent slider
- Pic. 6 Open the crescent slider, the tick falls into the compartment
- Pic. 7 Close the crescent slider, the tick is then secured in the compartment
- Pic. 8 Once completed, open the cap lock (turn to the left) to dispose of all ticks at once

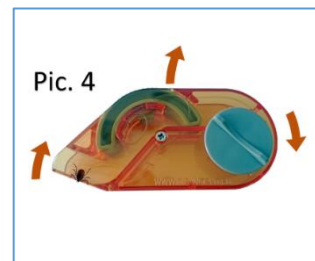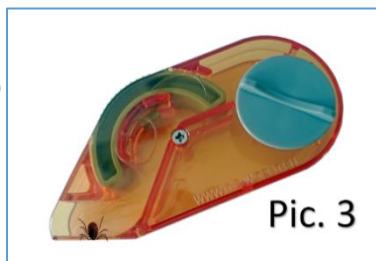

- Pic. 1 Cierre el control deslizante semirredondo (gire con el pulgar en la dirección de la flecha)
- Pic. 2 Coloque el mouse, centre y desplace la sección en forma de V en dirección a la garrapata
- Pic. 3 Ahora el mouse se encuentra debajo de la cabeza de la garrapata
- Pic. 4 Extraiga ahora la garrapata (mueva el mouse en la dirección de la flecha)
- Pic. 5 Ponga en vertical el mouse; la garrapata cae sobre la parte inferior del control deslizante
- Pic. 6 Abra el control deslizante; la garrapata cae en la cámara inferior
- Pic. 7 Cierre el control deslizante; la garrapata queda atrapada en la cámara
- Pic. 8 Elimine al final todas las garrapatas abriendo la tapa (gire a la izquierda para abrirla)

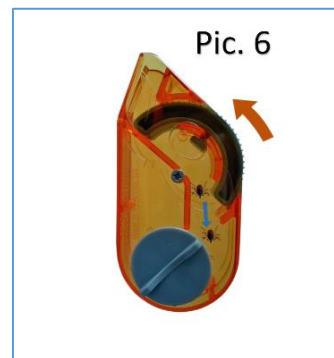

- Pic. 1 Chiudere il cursore a mezzaluna (ruotare con i pollici in direzione della freccia)
- Pic. 2 Posizionare il mouse, spostando la parte a forma di V al centro, in direzione della zecca
- Pic. 3 Ora il mouse si trova sotto la testa della zecca
- Pic. 4 Prelevare semplicemente la zecca (spostare il mouse in direzione della freccia)
- Pic. 5 Collocare il mouse in posizione verticale, la zecca cade sul lato posteriore del cursore
- Pic. 6 Aprire il cursore, la zecca cade nella camera posteriore
- Pic. 7 Chiudere il cursore, la zecca è chiusa nella camera
- Pic. 8 Al termine, estrarre tutte le zecche, aprendo il tappo di chiusura (per aprire ruotare verso sinistra)

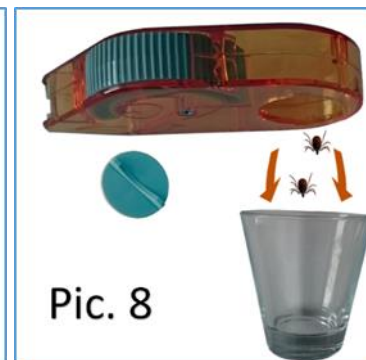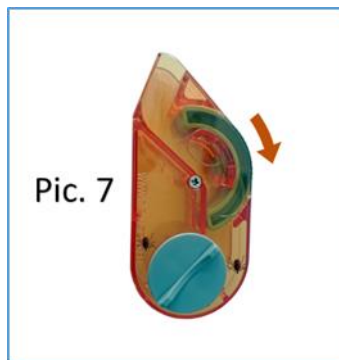

- Pic. 1 Закрыть задвижку в виде полумесяца (повернуть большим пальцем по направлению стрелки)
- Pic. 2 Приложить мышь и V-вырезом в середине направить к Клещу
- Pic. 3 Мышь находится ниже головы Клеща
- Pic. 4 теперь вы просто вытягиваете Клеща (двигаем мышь, как указывают стрелки)
- Pic. 5 Подымаем Мышь в вертикальное положение, Клещ падает в нижнюю часть задвижки в виде полумесяца
- Pic. 6 Открываем задвижку в виде полумесяца, Клещ падает в нижнюю камеру (накопитель)
- Pic. 7 задвижку в виде полумесяца закрываем, Клещ окончательно попадает в нижнюю камеру (накопитель), для удаления следующих клещей повторите движения начиная с Pic. 2
- Pic. 8 После того как все Клещи собраны, открыв крышку нижней камеры (накопитель) вы уничтожаете Клещей (чтобы открыть крышку нужно повернуть ее влево)



- Pic. 1 Fermez le coulisseau de lune (tournez-le du pouce en direction de la flèche)
- Pic. 2 Posez la mouse. Poussez la coupe triangulaire centrée vers la tique.
- Pic. 3 Maintenant la mouse se trouve sous la tête de la tique.
- Pic. 4 Simplement faites lever la tique (bougez la mouse en direction de la flèche)
- Pic. 5 Mettez la mouse verticalement, la tique tombe sur le dessous du coulisseau de lune
- Pic. 6 Ouvrez le coulisseau de lune, la tique tombe dans la chambre inférieure
- Pic. 7 Fermez le coulisseau de lune, maintenant la tique est bloquée dans la chambre. Pour enlever des autres tiques continuez avec la pic. 2
- Pic. 8 A la fin éliminez toutes les tiques en ouvrant la fermeture de capuchon (tournez à gauche pour ouvrir)

Ticksmouse

DIS-WORLD
 Daniela Schwarz Johannisson
 Elmenhorster Straße 45
 23863 Bargfeld / Germany
 www.ticksmouse.eu